

 **ceramill**[®] CAD/CAM



INTEGRADO

EFICIENTE

DIVERSIDADE

ABERTO



AMANNGIRRBACH



Ponte totalmente anatômica

Barra sobre base de titânio

Pilar sobre base de titânio (personalizado)

Attachment

Coroa telescópica aberta

Pilar de titânio (individual)

Ponte anatômica parafusada sobre implante (sobre base de titânio)

Ponte de coroa veneer

Ponte com redução anatômica

Coroa telescópica primária

Onlay

Faceta

METAL

ALL IN

CERÂMICA

Ceramill Sintron

Ceramill TI-Forms

Ceramill ZI

Ceramill Zolid

VITA SUPRINITY®

IPS e-max CAD (Ivoclar Vivadent)

VITA Mark II

VITA TRILUXE FORTE

Coroa totalmente anatômica

Inlay

Coroa totalmente anatômica

Onlay

Coroa parcial

Faceta

Prótese total

Placa oclusal

Ponte totalmente anatômica

Sobre-prensados totalmente anatômicos

Fabricação digital de modelos

Provisórios casca de ovo

VITA ENAMIC®

3M Lava® Ultimate
EM BREVE!

EM DESENVOLVIMENTO!

Ceramill D-Wax

Ceramill Splintec

Ceramill Temp

Ceramill Wax

Ceramill PMMA

Ceramill N-Plast

EM DESENVOLVIMENTO!

EM DESENVOLVIMENTO!

HOUSE

HÍBRIDOS

ACRÍLICO

Materiais dentais para a mais alta demanda em qualidade e estética.



ceramill® zolid white

Alta translucidez de zircônia monolítica para elementos anatômicos totais



ceramill® zolid presshade 1

Alta translucidez de zircônia monolítica para elementos anatômicos totais



ceramill® zolid presshade 2

Alta translucidez de zircônia monolítica para elementos anatômicos totais



ceramill® zolid presshade 3

Alta translucidez de zircônia monolítica para elementos anatômicos totais



ceramill® sintron®

Sinterização de metal não precioso para fresagem a seco inhouse




ceramill® zi

Zircônia clássica de alta qualidade para fabricação de estruturas.



ceramill® splintec

Acrílico incolor Médico pmma para placa de bruxismo

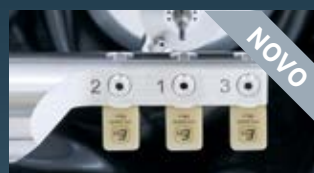


VITA ENAMIC®

NOVO

VITA

Cerâmica híbrida com dupla estrutura de rede para absorção superior das forças mastigatórias

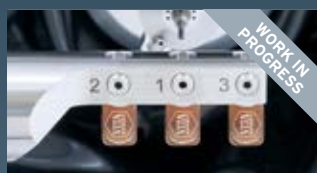


WORK IN PROGRESS

VITA SUPRINITY®

VITA

Nova zircônia infiltrada de vitrocerâmica de silicato de lítio pré-cristalizado

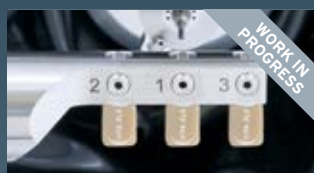

WORK IN PROGRESS

VITA SUPRINITY®

VITA

Nova zircônia infiltrada de vitrocerâmica de silicato de lítio cristalizado



VITABLOCS® Mark II

VITA

Bloco de cerâmica com fina partícula feldspática para Ceramill Motion 2



VITABLOCS® TriLux forte

VITA

Bloco de cerâmica feldspática com fina estrutura para quatro diferentes graus de saturação de cor



ceramill® temp light

Resina colorida para aplicações temporárias



ceramill® temp middle

Resina colorida para aplicações temporárias



ceramill® temp dark

Resina colorida para aplicações temporárias



ceramill® m-plast

Acrílico especial para alta velocidade de fresagem do modelo



ceramill® wax

Queima de cera sem resíduo. Para técnica de fundição e prensagem



ceramill® wax

Queima de cera sem traços. Para técnica de moldagem e "pressing"



EM DESENVOLVIMENTO

ceramill® d-wax

Cera especial para produção de próteses totais com o Ceramill Mind



ceramill® pmma

Queima de acrílico sem resíduo. Para técnica de fundição e prensagem

MODELO PRECISO

CADEIA PRECISA



artex®cr

Articulador totalmente ajustável, serve de simulador para práticas clínicas e laboratoriais.

- _Oferece todas as funções para análise dos movimentos excursivos.
- _Função sideshift ajustável

giroform®

Preciso e com rápida forma de confeccionar modelos de precisão com custo otimizado

- _Compensa expansão do gesso devido à segmentação da arcada dentária
- _Modelo feito em minutos
- _Perfeita "forma" (modelo de precisão) para digitalização

ceramill® transferkit

Ceramill Map400-Transferência sem perdas de dados do paciente

- _A digitalização da situação do modelo no preciso Artex
- _Manuseio confiável, rápido e sem complicações

ceramill® map400

O scanner funcional - preciso, rápido e com integração total com o sistema Splitex

- _Grande campo de escaneamento, que permite escanear modelos de relação intermaxilar
- _“ISS” (Estratégia de digitalização inteligente) para deixar ainda mais rápido o escaneamento.
- _Ceramill MultiCap - Suporte múltiplo para escaneamento de até 12 elementos simultaneamente



Registro dos dados do paciente usando o Artex CR



Máxima precisão com controle da expansão do gesso.



Ceramill Cockpit:
Console de controle digital para todo processo Ceramill, com seleção de indicações



Escaneamento do modelo por meio de projecção de feixe de luz. Até 8 elementos podem ser gravados por escaneamento utilizando a „Estratégia de escaneamento inteligente” (Intelligent Scan Strategy - ISS).

DESIGN (CAD) OCCLUSÃO VIRTUAL



ceramill® mind

A peça central do sistema: o Software de desenho

- _ Economia de tempo devido ao ciclo de trabalho intuitivo
- _ Grande gama de funções
- _ Adequado para um grande número de indicações



ceramill artex®

A interface funcional entre as tecnologias dentais manuais e digitais

- _ Artex Virtual com ilimitadas funções
- _ O contorno oclusal dinâmico evita contato prematuro
- _ Durante o desenho, o espaço é planejado automaticamente para receber a cerâmica




ceramill® match 2

Software CAM para um fácil gerenciamento de blocos e controle da máquina.

- _ Rápido e simples posicionamento do desenho no bloco
- _ Cálculo rápido para o caminho da fresagem.
- _ Caixa de suporte para sinterização de extensas estruturas em zircônia

ceramill® m-plant

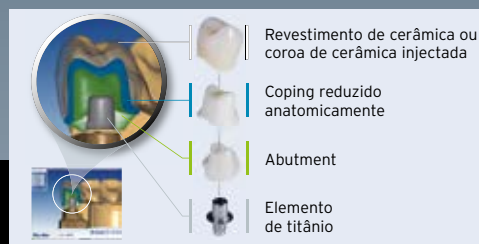

Ceramill M-Plant:

Módulo de implante do Ceramill Mind para fabricação de abutments customizados (sobre interface em titânio). Quadro geral com todos os sistemas compatíveis pode ser encontrado em www.amanngirrbach.com



Ceramill Mind,

módulo Prótese Total:
Criação e fabricação de prótese total em cera para prova em um fluxo contínuo.



Ceramill M-Bars:


Fabricação de barras usando Ceramill Sintron ou Cera

PRODUÇÃO (CAM)




3shape
dental wings
i-tero
e outros com
dados STL não
criptografados

C/L/A(mm):588/516/755

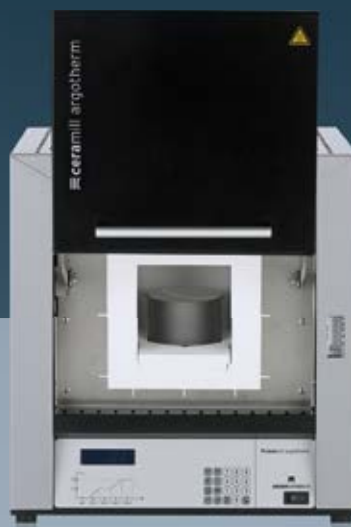

C/L/A(mm):385x400x465

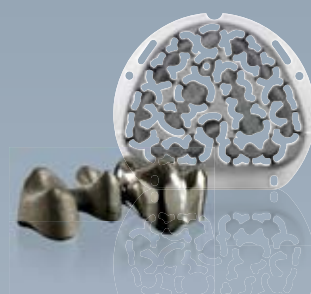

ceramill® motion 2

ceramill® argovent **ceramill® argotherm**


Processamento com irrigação ou a seco, num equipamento compacto

- _ Processo de fresagem/desgaste com irrigação/seco - processamento compatível com todo o tipo de material: Zircônia, acrílico, cerâmica de vidro, cera e outros
- _ Gama ilimitada de indicações, aplicável a indicações futuras (prótese total, guia cirúrgico, modelos etc.)


Forno de sinterização, com controle de gás, para o Ceramill Sintron e cadinho de sinterização blindado.

- _ Programa de controle de sinterização desenvolvido especialmente para o Ceramill Sintron
- _ Ativação de resfriamento após sinterização
- _ Blindagem para consumo de gás mínimo

UPDATE

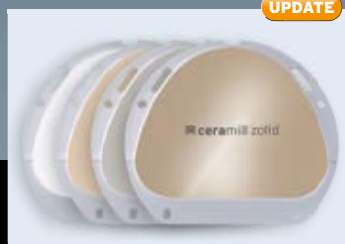

Ceramill Zolid:
Zircônia translúcida com propriedades do material otimizadas e alcance estendido

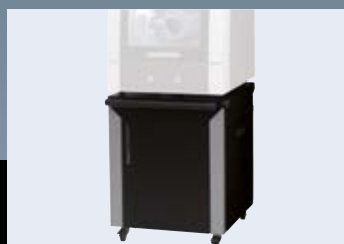

Ceramill Coolstream - Carrinho de transporte da Motion2 integrado com o líquido refrigerante com espaço para aspirador de sucção nas fresagens a seco.



Ceramill Sintron Starterkit - uma fácil introdução do processamento do Sintron



Discover Ceramill online!

Ceramill - 100% aberto

O módulo de software “Ferramenta de Upload Ceramill” abre o caminho para os Escanners (3shape®, DentalWings®) onde os usuários para produzir desenhos em seu próprio laboratório usando a fresadora Ceramill Motion ou dentro do Ceramill M-Center.




AMANNGIRRBACH

HEADQUARTER AUSTRIA
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

AMERICA
Amann Girrbach America, Inc.
Charlotte, U.S.A.
Fon +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com

BRASIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brasil
Fon +55 41 3287 0897
brasil@amanngirrbach.com

ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia
Fon +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com

CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China
Fon +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com

www.amanngirrbach.com